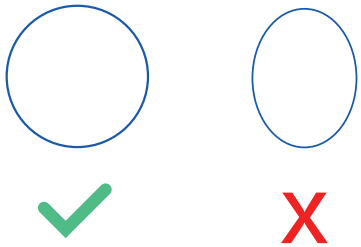
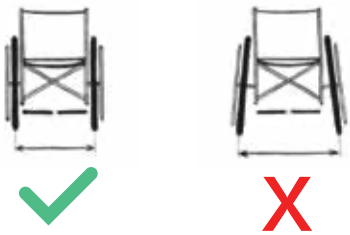
トードードライブ取付適合一覧

[todo] WORKS

Todo Drive
車いす取り付け可否シート

モーターマウントのスペースは最低でも9cm必要です。	
カーボン製の車いすに取り付けられません。 チタン製の車いすに取り付けると破損する恐れがあります。	
フレームの形状は楕円形ではなく、円形でないと取り付けられません。	
キャンバー角は3° 以下でないと取り付けられません。	
20インチから26インチのホイールにのみ対応しています。	

@permobiljapan

販売店

MiKi / NOVAIV

• 取り付け前









• 取り付け後









モデル	MiKi / NOVAIV
座幅	400 mm
座奥	380 mm
バックレスト	410 mm
リヤタイヤサイズ	600 mm (24 in)
キャスターサイズ	100 mm
空気タイヤ	25 mm (W)
ノンパンクタイヤ	-
メインユニットフレームけい	20 mm　T クランプ：L サイズ、スペーサー（T-Inner）：25 mm
モーター部フレームパイプけい	25 mm　W クランプ：M サイズ、スペーサー（T-Inner）：25 mm
ジョイスティック部フレームバイプけい	25 mm　T クランプ:S サイズ、スペーサー（T-Inner）:25 mm（車椅子側） スペーサー（T-Inner）：20 mm（操作部側）
モーターマウントスペース	145 mm
適合可否	○
メモ	モーターの取り付け（タイヤ横）下には取り付け不可。フットサポートのカーブしているところに取り付け。左右反対に取り付けるとレバーが下にきてしまう。車軸を後ろに動かす→下のフレームに取り付けも可。

MiKi / NOVAIV_SW

• 取り付け前









• 取り付け後

前

後

左

右

取り付け後の写真はありません。

モデル	MiKi / NOVAIV_SW
座幅	390 mm
座奥	360 mm
バックレスト	400 mm
リヤタイヤサイズ	635 mm (25 in)
キャスターサイズ	90 mm
空気タイヤ	○
ノンパンクタイヤ	-
メインユニットフレームけい	20 mm
モーター部フレームパイプけい	25 mm
ジョイスティック部フレームバイプけい	25 mm
モーターマウントスペース	90 mm
適合可否	不可

メモ　モーター取り付けスペースが狭い。

Miki / cartima CRT

• 取り付け前









• 取り付け後

前

後

左

右

適合不可の為、取り付け後の写真はありません。

モデル	MiKi / cartima CRT
座幅	370 mm
座奥	420 mm
バックレスト	580 mm
リヤタイヤサイズ	600 mm (24 in)
キャスターサイズ	150 mm
空気タイヤ	-
ノンパンクタイヤ	○
メインユニットフレームけい	20 mm
モーター部フレームパイプけい	15 mm　W クランプ：M サイズ、スペーサー（W-Inner）：17 mm
ジョイスティック部フレームバイプけい	18 mm
モーターマウントスペース	110 mm
適合可否	不可
メモ	モーター取り付けの下のフレームからブレーキ取り付け部までのスペースが130mm 程度。 ブレーキを取り外さないとモーターの取り付けは不可。 Y ブレーキを取り付けようにもスペースがなく取り付けは不可。

MiKi / Grand Fletcher UniDash_SP

• 取り付け前









• 取り付け後

前

後

左

右

適合不可の為、取り付け後の写真はありません。

モデル	MiKi / Grand Fletcher UniDash_SP
座幅	420 mm
座奥	400 mm
バックレスト	820 mm
リヤタイヤサイズ	320 mm (12 in)
キャスターサイズ	150 mm
空気タイヤ	-
ノンパンクタイヤ	○
メインユニットフレームけい	20 mm
モーター部フレームパイプけい	20 mm
ジョイスティック部フレームバイプけい	20 mm
モーターマウントスペース	-
適合可否	不可

メモ　モーターの取り付け不可。

MiKi / Grand Fletcher UniDash_EX

• 取り付け前









• 取り付け後

前

後

左

右

取り付け後の写真はありません。

モデル	MiKi / Grand Fletcher UniDash_EX
座幅	335 mm
座奥	310 mm
バックレスト	750 mm
リヤタイヤサイズ	390 mm (15 in)
キャスターサイズ	150 mm
空気タイヤ	○
ノンパンクタイヤ	-
メインユニットフレームけい	20 mm
モーター部フレームパイプけい	20 mm
ジョイスティック部フレームバイプけい	22 mm
モーターマウントスペース	-
適合可否	△

メモ　後輪へ取り付けの可能性あり。ただし、フレームの延長が必要。
長いクランプ (+30mm) があれば、取り付けが出来るかもしれない。

MiKi / TR-1

• 取り付け前









• 取り付け後









モデル	MiKi / TR-1
座幅	400 mm
座奥	380 mm
バックレスト	680 mm
リヤタイヤサイズ	558 mm (22 in)
キャスターサイズ	150 mm
空気タイヤ	○
ノンパンクタイヤ	-
メインユニットフレームけい	25 mm
モーター部フレームパイプけい	25 mm
ジョイスティック部フレームバイプけい	25 mm
モーターマウントスペース	-
適合可否	△

メモ　タイヤ後方に取り付け。コントローラーの向きを反対にする。

松永製作所 / A-MAX

• 取り付け前









• 取り付け後









モデル	松永製作所 / A-MAX
座幅	360 mm
座奥	370 mm
バックレスト	400 mm
リヤタイヤサイズ	600 mm (23 in)
キャスターサイズ	100 mm
空気タイヤ	-
ノンパンクタイヤ	-
メインユニットフレームけい	25 mm　T クランプ：L サイズ、スペーサー（T-Inner）：25 mm
モーター部フレームパイプけい	25 mm　T クランプ：M サイズ、スペーサー（T-Inner）：25 mm
ジョイスティック部フレームバイプけい	25 mm　T クランプ:S サイズ、スペーサー（T-Inner）:25 mm（車椅子側） スペーサー（T-Inner）：20 mm（操作部側）
モーターマウントスペース	200 mm
適合可否	○

メモ　ブレーキは外す。タイヤの位置調整。

松永製作所 / A-MAX Swing

• 取り付け前









• 取り付け後









モデル	松永製作所 / A-MAX Swing
座幅	360 mm
座奥	345 mm
バックレスト	400 mm
リヤタイヤサイズ	635mm (25 in)
キャスターサイズ	130 mm
空気タイヤ	○
ノンパンクタイヤ	-
メインユニットフレームけい	23 mm　T クランプ：L サイズ、スペーサー（T-Inner）：25 mm
モーター部フレームパイプけい	25 mm　W クランプ：M サイズ、スペーサー（W-Inner）：25 mm
ジョイスティック部フレームバイプけい	25 mm　T クランプ:S サイズ、スペーサー（T-Inner）:25 mm（車椅子側） スペーサー（W-Inner）：25 mm（操作部側）
モーターマウントスペース	100 mm
適合可否	○（Y ブレーキに変更必須）
メモ	ジョイスティックをスイングアウェイ足台部分に取り付ける為、スイングアウェイができない（取り付け側） 足台を取り外すことを考え、干渉しないように取り付ける。

松永製作所 / NEXTCORE くるり（低床）

• 取り付け前









• 取り付け後

前

後

左

右

適合不可の為、取り付け後の写真はありません。

モデル	松永製作所 / NEXTCORE くるり（低床）
座幅	380 mm
座奥	400 mm
バックレスト	420 mm
リヤタイヤサイズ	559 mm (22 in)
キャスターサイズ	100 mm
空気タイヤ	○
ノンパンクタイヤ	-
メインユニットフレームけい	20 mm
モーター部フレームパイプけい	20 mm
ジョイスティック部フレームバイプけい	20 mm
モーターマウントスペース	0 mm
適合可否	不可

メモ　6 輪、タイヤとフレームにスペースがなく、モーターの取り付けが不可。

松永製作所 / Grace Core

• 取り付け前









• 取り付け後

前 後 左 右

適合不可の為、取り付け後の写真はありません。

モデル	松永製作所 / Grace Core
座幅	400 mm
座奥	440 mm
バックレスト	480 mm
リヤタイヤサイズ	570 mm (22 in)
キャスターサイズ	130 mm
空気タイヤ	-
ノンパンクタイヤ	○
メインユニットフレームけい	21 mm
モーター部フレームパイプけい	24 mm
ジョイスティック部フレームバイプけい	20 mm
モーターマウントスペース	120 mm
適合可否	不可

メモ　ブレーキを取り外すと、モーターの取り付け不可。

松永製作所 / Grace Core ミニモ

• 取り付け前









• 取り付け後

前

後

左

右

適合不可の為、取り付け後の写真はありません。

モデル	松永製作所 / Grace Core ミニモ
座幅	400 mm
座奥	400 mm
バックレスト	440 mm
リヤタイヤサイズ	508 mm (20 in)
キャスターサイズ	120 mm
空気タイヤ	-
ノンパンクタイヤ	○
メインユニットフレームけい	20 mm
モーター部フレームパイプけい	25 mm
ジョイスティック部フレームバイプけい	20 mm
モーターマウントスペース	130 mm
適合可否	不可
メモ	前座高 380mm 低床 (130mm) だとブレーキが付かない。

日進医療器 / MS-Ⅲ

• 取り付け前









• 取り付け後









モデル	日進医療器 / MS-Ⅲ
座幅	305 mm
座奥	370 mm
バックレスト	380 mm
リヤタイヤサイズ	580 mm (23 in)
キャスターサイズ	90 mm
空気タイヤ	○
ノンパンクタイヤ	-
メインユニットフレームけい	23 mm　T クランプ：L サイズ、スペーサー（T-Inner）：25 mm
モーター部フレームパイプけい	20 mm　W クランプ：M サイズ、スペーサー（W-Inner）：25 mm
ジョイスティック部フレームバイプけい	20 mm　T クランプ:S サイズ、スペーサー（T-Inner）:25 mm（車椅子側）
モーターマウントスペース	150 mm
適合可否	○（Y ブレーキに変更必須）

メモ

OX / SX

• 取り付け前









• 取り付け後

前

後

左

右

適合不可の為、取り付け後の写真はありません。

モデル	OX / SX
座幅	340 mm
座奥	340 mm
バックレスト	360 mm
リヤタイヤサイズ	600 mm (24 in)
キャスターサイズ	100 mm
空気タイヤ	○
ノンパンクタイヤ	-
メインユニットフレームけい	22 mm
モーター部フレームパイプけい	楕円形の為、取り付け不可
ジョイスティック部フレームバイプけい	23 mm
モーターマウントスペース	170 mm
適合可否	不可

メモ