

テーブルに入りやすい床からの
座面の高さ (41cm)

キャスターグライド® (特許取得)

キャスターグライドは、低速
でも狭い場所でも安全に走行
できます。

パンクしないタイヤ
(7インチキャスター)

仕様

以下の仕様はM1 コンフォートモデル限定の仕様となります。

耐荷重	136kg	電動ティルト角度	0° - 50°
最高速度	6 km/h	リクライニング角度	85° - 110° (手動)
連続走行距離	26 km	レッグレスト角度	80 - 135° (手動)
全幅	61cm	バックレストの高さ	45 - 74 cm (2.5cmずつ調整可)
全長	90 cm	座面の奥行	35 - 56 cm (2.5cmずつ調整可)
最小回転半径	52 cm (20.5")	座面の幅	35 - 56 cm (5cmずつ調整可)
地面との距離	8 cm	アームパッドの長さ	5 x 25 cm, 5 x 35cm 10 x 25 cm, 10 x 36 cm
推奨バッテリー	MK 12V/60Ah		
バッテリーを含む重量	145kg		
エレクトロニクス	VR2 Advanced		
座面高	41 cm		



permobil



快適を全身に
走行を上質に



ペルモビール株式会社
〒135-0004 東京都江東区森下2-7-6
Tel : 03-6659-9500 Fax : 03-6659-9507
Web : www.permobilkk.jp
Mail : Pkk.Support@permobil.com

株式会社フロンティア
千葉本社 福祉本部
〒261-0002 千葉県千葉市美浜区新港42-4
Tel : 043-301-8338
Web : www.frontier-ph.com/

FOLLOW US!

@permobiljapan

@permobil_japan

@permobilj

2019-03-01





椅子の傾きで お尻の痛みを軽減

座面が後ろに傾く（ティルト）ので、車いす上で休憩ができます。それ以外にも、安定した姿勢や下り坂の走行でほかにはない安心感を得ることができます。

調整可能な快適シート




コンフォート ヘッドサポート

5か所の回旋式の調整部位がフレキシブルに動き、あごや首を最大限にサポート。左右へオフセットすることもできるので、側部からのサポートも可能です。



パッド部分のカバーにグライドウェアを採用。2層構造の生地により、生地と生地がすべるので、頭や耳とカバーの間に摩擦が生じません。

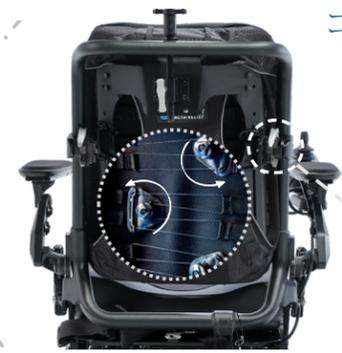

コンフォート バックサポート リリーフ

お使いの車いすの座り心地や安定性を改善できる背もたれ。新開発のダイヤル式のワイヤー張り調整で、様々な姿勢をサポートできます。



簡単に調整可能なダイヤル式

エンブレイスクッション

骨盤から大腿部までサポートし安定した姿勢に。摩擦とずれも軽減するグライドウェア素材のカバー。



COMFORT-TEK™ お掃除もラクラク！

丈夫設計

丈夫なひじ置きは体重を預けても体をしっかりと支えます。足台の上に立っても車いすが倒れることはありません。非常に耐久性に優れたモデルです。



2点止めの安心感

中輪駆動（6輪車）

中輪駆動車いすは安定性に加え、回転半径が非常に小さく、様々な環境に対応して走行することができます。また、乗った際の重量バランスに優れ、スロープ上や凹凸のある路面上でも高い安定性を発揮します。



最小回転半径：52 cm

安定性の向上

フレックスリンク

FLEXLINKによる振動軽減で、様々な地形上での快適な乗り心地を実現します。これは疲労、痛み、不快感等を軽減し、日々のパフォーマンスを向上させます。



振動軽減

